



Backing up a Customized Vocabulary

Quick Reference Guide for the TouchChat® App

TouchChat Support
support@touchchatapp.com
www.touchchatapp.com

It's a good idea to keep a copy of all custom files on a computer for safekeeping. There are a number of options that will be dependent on what you have available to you.


Note: This feature is not available in a TouchChat Lite app.

Backing up a Customized Vocabulary File using iTunes®

It's a good idea to keep copies of all custom files on a computer for safekeeping. We suggest always using a wired connection to a computer to copy files consistently.

1. Connect the device to the computer.
2. Open iTunes on the computer.
3. In TouchChat, select **Vocab** and **Choose New Vocab**.

4. Select **Menu, Import/Export Vocab, and Export to iTunes**.
5. From the menu that opens, select the vocabulary file you want to export and select **Save**.
6. In iTunes on the computer, click the small device icon in the upper left portion of the window.

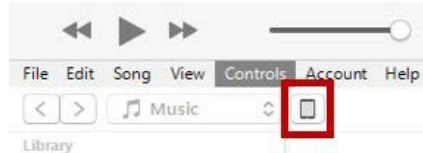

7. In the window that opens, click File Sharing on the left.
8. In the Apps column, select the TouchChat app.
9. From the column under **TouchChat Documents**, select the vocabulary file you are exporting.
10. Click **Save** on the bottom right. A Save window will open.
11. Navigate to the folder in which you want to save the file and click **Select Folder**.
12. Click **Done** and exit from iTunes.


Backing up a Customized Vocabulary File using iShare

Important! Before starting this procedure, make sure the device is connected to the Internet. On the device, go to **Settings** and then **Wi-Fi**.

To use iShare, you must have an iShare account.


1. In TouchChat, select **Vocab** and **Choose New Vocab**.

2. Select **Menu** and **iShare Service**.

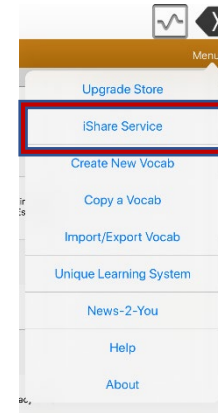


3. Select **Login to iShare**.

Note: If you don't have an iShare account, you can receive a free 365-day trial by selecting **Register for iShare**. Enter your name, create and confirm a password, and select **Register**.

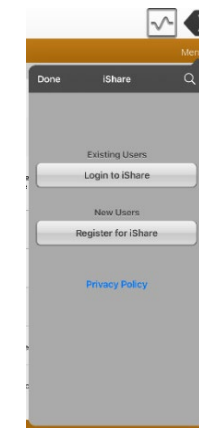

4. Enter your iShare account e-mail address and password.
5. Select **Login** and select **Okay**.
6. Choose the folder you want to use.

7. Select **+** and then select the file you want to save.

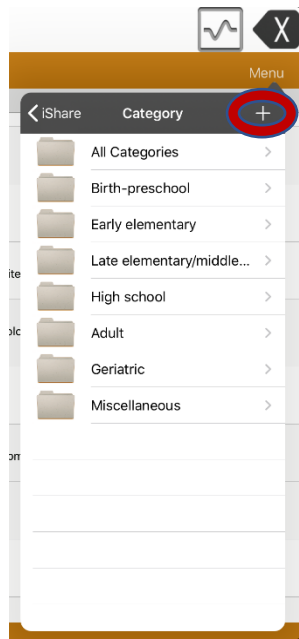

8. Enter a name, description, keywords, and file revision.
9. Select **Upload** and select **Okay**.

To download a previously saved file: Navigate to the folder, select the file, and select **Download**.


To delete a previously saved file: Navigate to the folder, select the file, select **Delete**, and select **Yes** to confirm.

Backing up a Customized Vocabulary File using AirDrop®, Dropbox®, Google Drive™, or Email


1. In TouchChat, select **Vocab** and **Choose New Vocab**.
2. Select **Menu** and **Import/Export Vocab**.



3. Select **Export and Share**.

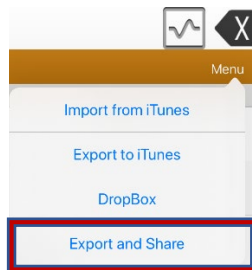

4. Select the vocabulary file you want to export.
5. Select **Done** and select the method you want to use to share the file.

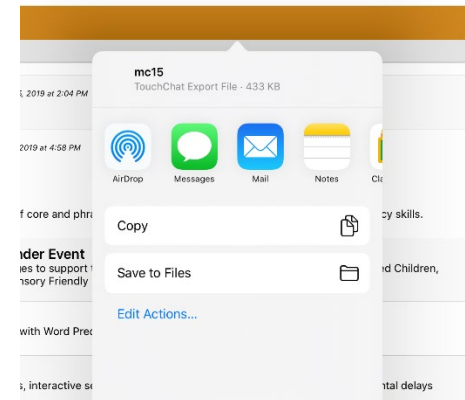

- **AirDrop:** Bluetooth® and Wi-Fi® must be active. You will see the nearby devices that have AirDrop on and can accept your file. Choose the device you want.
- **Dropbox:** Requires a Dropbox account. Wi-Fi must be active or you must have the Dropbox app on your device.
- **Google Drive:** Requires Google Drive set up on the device and access to Wi-Fi.
- **Email:** Requires an email account set up on the device and access to Wi-Fi.



Haciendo una copia de seguridad de un vocabulario personalizado

Guía de referencia rápida para el TouchChat®

Asistencia con TouchChat
support@touchchatapp.com
www.touchchatapp.com

Es una buena idea conservar una copia de todos los archivos de vocabulario personalizados en una computadora. Hay varias opciones dependiendo de lo que tenga disponible.


Nota: Esta función no está disponible en el TouchChat Lite.

Haciendo una copia de seguridad de un vocabulario personalizado con iTunes

Es una buena idea conservar una copia de todos los archivos personalizados en una computadora. Sugerimos una conexión alámbrica con una computadora para copiar los archivos de forma consistente.

1. Conecte el equipo a la computadora.
2. Abra iTunes en la computadora.
3. En el TouchChat, seleccione **Vocabulario** y **Escoger un vocabulario nuevo**.

4. Seleccione **Menú, Importar/Exportar** y **Exportar a iTunes**.
5. En el menú, seleccione el archivo de vocabulario que desea exportar y luego **Guardar**.
6. En iTunes en la computadora, toque el símbolo del equipo que aparece en la parte superior izquierda de la ventana.

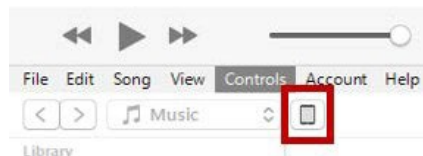


7. En la ventana, toque la opción de Compartir archivos (“**File Sharing**”) a mano izquierda.
8. En la columna de aplicaciones (Apps), seleccione el TouchChat.
9. En la columna bajo Documentos de TouchChat (“**TouchChat Documents**”), seleccione el archivo de vocabulario que desea exportar.
10. Toque Grabar (“**Save**”) en la inferior derecha. Aparecerá una ventana para grabar.
11. Vaya a la carpeta en donde desea grabar el archivo y toque Seleccionar carpeta (“**Select Folder**”).
12. Toque OK (“**Done**”) para salir de iTunes.

Haciendo una copia de seguridad de un vocabulario personalizado con iShare


¡Importante! Antes de empezar este procedimiento, asegúrese que el equipo esté conectado al Internet. En el equipo, vaya a **Configuración** y luego **Wi-Fi**.

Para usar iShare, necesitará una cuenta de iShare.

1. En el TouchChat, seleccione **Vocabulario** y **Escoger un vocabulario nuevo**.
2. Seleccione **Menú** y **Servicio de iShare**.

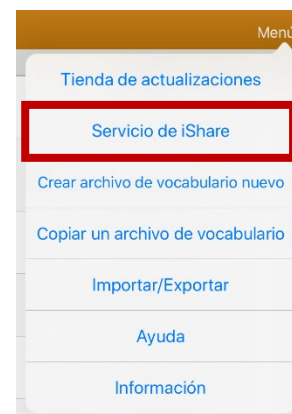


3. Seleccione **Ingresar a iShare**.
Nota: Si no tiene una cuenta de iShare, puede suscribirse a un período probatorio de 365 días seleccionando **Registración a iShare**. Ingrese su nombre, cree y confirme una contraseña y luego **Registrar**.

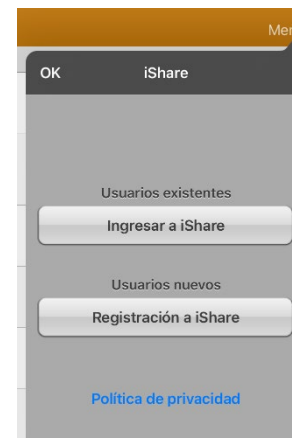

4. Ingrese el correo electrónico y la contraseña de su cuenta de iShare.
5. Seleccione **Ingresar** y **OK**.
6. Seleccione la carpeta que desea usar.

7. Seleccione **+** y luego el archivo que desea grabar.

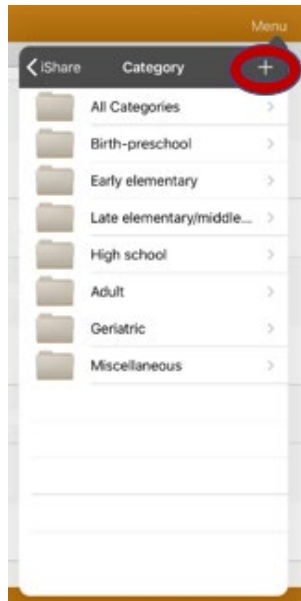

8. Ingrese un nombre, una descripción, palabras claves y la versión del archivo.
9. Seleccione Subir ("**Upload**") y luego **Okay**.

Para descargar un archivo grabado: Vaya a la carpeta, seleccione el archivo y Descargar ("**Download**").

Para borrar un archivo grabado: Vaya a la carpeta, seleccione el archivo, toque **Borrar** ("**Delete**") y confirme.

Haciendo una copia de seguridad de un vocabulario personalizado con **AirDrop**[®], **Dropbox**[®], **Google Drive**[™] o **Email**


1. En el TouchChat, seleccione **Vocabulario** y **Escojer un vocabulario nuevo**.
2. Seleccione **Menú** e **Importar/Exportar**.



3. Seleccione **Exportar y compartir**.



4. Seleccione el archivo de vocabulario que desee exportar.
5. Seleccione **OK** y el método que desea usar para compartir el archivo.

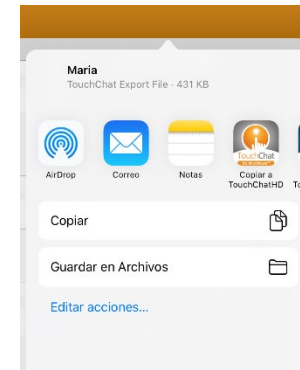

- **AirDrop:** Tanto Bluetooth[®] como Wi-Fi[®] deben estar activos. Aparecerán los equipos cercanos con AirDrop activado que puedan aceptar el archivo. Seleccione el equipo deseado.
- **Dropbox:** Requiere una cuenta de Dropbox. Wi-Fi debe estar activado y necesita la aplicación de Dropbox en su equipo.
- **Google Drive:** Requiere Google Drive en el equipo y acceso a Wi-Fi.
- **Email:** Requiere un correo electrónico configurado en el equipo y acceso a Wi-Fi.